



Un sistema, tre colori:
il composito fluido che
semplifica la scelta del colore
per restauri di tutte le classi.



Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative

- ✓ Scelta intuitiva del colore
- ✓ Ideale per restauri di tutte le classi
- ✓ Opacità naturalmente adattiva
- ✓ Iniezione praticamente senza bolle

Semplice e facile

Con solo 3 tonalità: Bright, Natural e Warm, Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative semplifica la scelta del colore. Basta osservare e scegliere intuitivamente uno dei tre colori.


Grazie all'opacità naturalmente adattiva, offre una traslucenza simile allo smalto sul bisello e sul bordo incisale e una traslucenza simile alla dentina in tutti gli altri casi, senza la necessità di un blocker (opaco).

- Praticamente nessuna bolla o fuoriuscita di materiale durante l'estrusione.
- Una scelta semplice ed intuitiva del colore, sia per i restauri anteriori sia per quelli posteriori
- Inventario semplificato per ottimizzare le tonalità poco utilizzate.




Indicazioni d'uso

incrementi fino a 2 mm

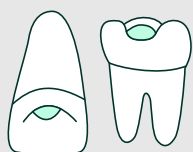

Classe I

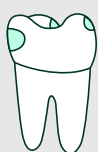

Classe II



Classe III



Classe IV



Classe V



Base



Liner



Riparazione di
restauri indiretti
(piccoli difetti)



Riparazione¹




Sigillante per solchi
e fessurazioni

¹ Riparazione di materiali provvisori acrilici e resina

Opacità naturalmente adattiva

La sua opacità naturalmente adattativa offre una traslucenza simile allo smalto dentale dove serve e un'opacità simile alla dentina in tutti gli altri casi, senza la necessità di un blocker (opaco).

Confronto tra compositi fluidi

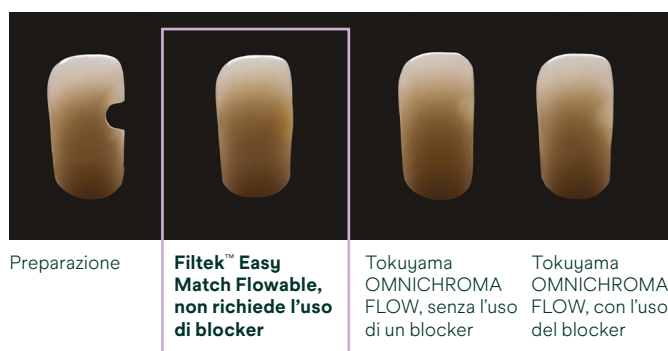

Confronto tra compositi universali




Fonte compositi fluidi: Dati interni Solventum. Tokuyama OMNICHROMA FLOW n. 121E04, Tokuyama OMNICHROMA® Blocker Flow: n. 142A35, Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative: #10777361.

Fonte per i compositi universali: Dati interni Solventum. Tokuyama OMNICHROMA® Lotto n. 098E53, n. 002EY8; 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative Lotto n. 9533695, n. NE57998.

Il composito universale 3M™ Filtek™ Easy Match e il composito fluido Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable mostrano il medesimo comportamento valore-spessore, superando i sistemi single-shade, sia per i compositi fluidi che per i compositi universali.

Lo spessore del composito è correlato al valore

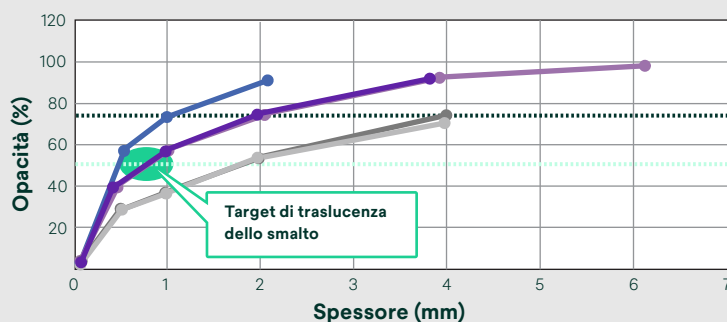

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative mostra un'opacità simile alla dentina in spessori >2 mm

Valore di dentina

Valore di smalto

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative mostra una traslucenza simile allo smalto in spessori compresi tra 0,5 e 1 mm

3M™ Filtek™ Supreme Ultra Universal Restorative | Dentina 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative | Natural Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable | Natural OMNICHROMA® Tokuyama OMNICHROMA FLOW Tokuyama

Source: Solventum internal data.

Come funzionano? Con il potere dell'opacità naturalmente adattiva.

A differenza di alcuni sistemi single shade, il composito Filtek™ Easy Match, non necessita di un blocker per mascherare l'oscurità della cavità orale nei restauri anteriori. La sua opacità naturalmente adattativa consente di ottenere una traslucenza simile a quella dello smalto dentale, con spessori da 0,5 a 1 mm, esattamente dove serve sul bisello e sul bordo incisale. In spessori ≥ 2 mm, fornisce un'opacità simile a quella della dentina.

Tutti i compositi diventano più traslucidi se applicati in strati più sottili. Tuttavia l'opacità naturalmente adattativa dei materiali da restauro Filtek™ Easy Match, si abbina in modo ottimale sia con la dentina sia con lo smalto, consentendo al composito di fondersi perfettamente con la struttura del dente circostante per un aspetto davvero naturale.

Scelta intuitiva del colore

L'intensità del colore rappresenta solo uno dei componenti che portano ad un abbinamento delle tonalità davvero ottimale. Anche un composito del "colore giusto" può differenziarsi dalla tonalità della dentatura circostante se il suo valore di opacità non corrisponde.

Con solo 3 colori, il composito fluido ed universale Filtek™ Easy Match coprono la scala colori VITA classica. Non richiedono l'uso di un blocker (opaco).

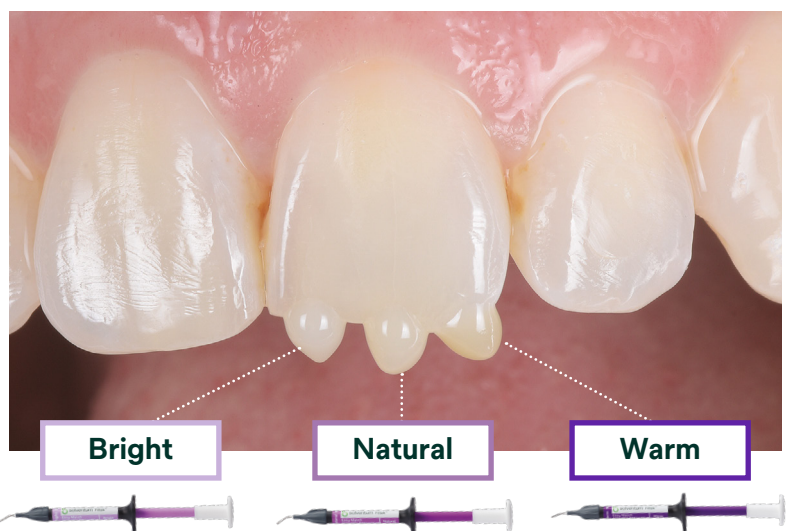


Immagine per gentile concessione del Dott. Brian Baliwas

Principali vantaggi:

- Selezione intuitiva ed immediata del colore
- Opacità naturalmente adattiva, non richiede l'uso di un blocker (opaco).
- Solo 3 tonalità per garantire un'eccellente match cromatico con il sorriso della maggior parte dei pazienti
- Inventario semplificato, aiuta a ridurre le tonalità poco utilizzate
- Il composito fluido e il composito universale Filtek™ Easy Match sono indicati per il riscaldamento.^{1,2}

1 Capsule riscaldabili fino a 70 °C/158 °F per un massimo di 1 ora.

2 Siringhe del composito fluido riscaldabili fino a 70 °C (158 °F) per 1 ora, fino a 25 volte.

Sorriso luminoso



Esempio della tonalità **Bright**.



Bright: basso croma, alto valore

Sorriso naturale



Esempio della tonalità **Natural**.



Natural: croma e valore bilanciati

Sorriso caldo



Esempio della tonalità **Warm**.



Warm: alto croma, basso valore

Praticamente nessuna bolla o fuoriuscita di materiale durante l'estrusione.

Durante l'iniezione di diversi compositi fluidi possono formarsi delle bolle. Il composito fluido Filtek™ Easy Match Flowable è stato progettato per evitare questo problema, grazie ad un'iniezione praticamente senza bolle o fuoriuscite di materiale, per un miglior controllo.

Grazie all'innovativo design della siringa che assicura un'iniezione omogenea riducendo al minimo la presenza di aria in due modi:

1. Design ergonomico della siringa

Il pistone, grazie allo stantuffo appositamente progettato, assicura che l'aria venga eliminata già durante il riempimento negli impianti di produzione Solventum. In questo modo durante l'estrusione il composito è perfettamente omogeneo, senza bolle, garantendo un'iniezione sicura e uniforme.



2. Innovativo design del puntale

Il composito fluisce attraverso l'innovativo puntale senza intrappolare aria, grazie alla parete interna liscia e rastremata, perfettamente allineata all'angolo di inclinazione della siringa.

vs.

Il puntale della siringa Solventum, grazie alla parete interna liscia e rastremata, contribuisce a prevenire la formazione di aria, garantendo un'iniezione sicura e priva di bolle

I puntali per compositi fluidi più comuni hanno una forma angolare che può favorire l'intrappolamento di aria all'interno del composito.

Tokuyama Estelite Universal Flow Super Low	Tokuyama OMNICHROMA FLOW
VOCO GrandioSO Heavy Flow	Ivoclar Tetric EvoFlow®
Dentsply Sirona TPH Spectra® ST Flow	Kerr Herculite™ Ultra Flow

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative



Item #	Descrizione
Bright	
6225B	2 Siringhe, 2 g cad 1 Conf di puntali da 20
Natural	
6225N	2 Siringhe, 2 g cad 1 Conf di puntali da 20
Warm	
6225W	2 Siringhe, 2 g cad 1 Conf di puntali da 20
Intro Kit	
6225K	3 Siringhe, 2 g cad: 1 per ogni colore Bright, Natural e Warm 2 Conf di puntali da 20

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative



Item #	Descrizione
Bright	
6210B	20 capsule da 0.2 g cad
6220B	1 Siringa, 4 g
Natural	
6210N	20 capsule da 0.2 g cad
6220N	1 Siringa, 4 g
Warm	
6210W	20 capsule da 0.2 g cad
6220W	1 Siringa, 4 g
Intro Kit	
6210K	60 Capsule, 0.2 g cad: 20 di ogni colore Bright, Natural e Warm
6220K	3 Siringhe, 4 g cad: 1 per ogni colore Bright, Natural e Warm

Nuovo

Sia Filtek™ Easy Match Flowable che Universal sono indicati per il riscaldamento¹² e compatibili con il Solventum™ Filtek™ fornello scalda compositi.

6520K	Include un dispositivo di riscaldamento con base riscaldante, un supporto per composito e custodia, cavo USB-C fisso, spina di alimentazione, adattatore per presa a parete e guida di avvio rapido.
-------	--

- 1 Riscalda le capsule fino a 70 °C per un massimo di 1 ora.
- 2 Riscalda le siringhe di composito fluido fino a 70 °C per 1 ora, fino a 25 volte.



- ✓ Veloce
- ✓ Semplice
- ✓ Portatile



Solventum Dental Solution
via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

I prodotti della linea Filtek™ sono dispositivi medici marcati CE, ad uso professionale. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Materiale tecnico scientifico riservato a medici dentisti.

© Solventum 2025. Solventum, il logo S e Filtek sono marchi di Solventum o delle sue affiliate. 3M e il logo 3M sono marchi commerciali di 3M. Tutti gli altri nomi commerciali citati sono marchi di servizio, marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende. OMG2033955.